



# TEG Manager<sup>®</sup>

Solution logicielle

Accédez aux données  
quand et où vous en  
avez besoin.



**HAEMONETICS<sup>®</sup>**



## Module du guide d'interprétation

### Une interprétation sans complication.

Le module du guide d'interprétation a été développé pour fonctionner avec le logiciel TEG Manager®, offrant aux cliniciens la possibilité de personnaliser les messages d'alerte clinique selon les protocoles en vigueur dans leur établissement.

Simplifiez l'affichage et l'interprétation des résultats de tests en permettant la configuration des messages d'alerte pour les paramètres en fonction de l'emplacement de l'analyseur, qu'il s'agisse d'un laboratoire ou d'un salle d'opération.

En outre, l'utilisation de modèles pré-définis adaptés aux protocoles hospitaliers permet d'éviter les erreurs qui peuvent se produire lors de la saisie manuelle des résultats de tests.

# TEG Manager®

## Solution logicielle

Le logiciel TEG Manager a été développé pour aider les cliniciens à gérer l'hémostase des patients en permettant d'accéder facilement aux informations des tests grâce à une solution logicielle totalement intégrée.

Il permet l'affichage à distance des données de diagnostic provenant des analyseurs TEG® 6s et TEG 5000 dans l'ensemble de l'hôpital.

Conçu sous forme de plate-forme Web, le logiciel TEG Manager permet de centraliser les données des tests. Il offre en outre une connectivité pour la gestion et la supervision de tous les analyseurs TEG 6s connectés, quel que soit leur emplacement.






Offrez un accès sur demande aux cliniciens pour simplifier l'affichage des résultats de tests.

- Améliorez la sécurité des patients grâce à la confirmation des informations démographiques du patient lors de la lecture de l'échantillon.
- Augmentez la rapidité des soins grâce à l'affichage des tests TEG® actifs à partir des analyseurs TEG, quel que soit le service de l'hôpital où ils se trouvent.
- Améliorez la comparaison entre les tests actifs et les tests ayant été précédemment effectués en combinant et en superposant les résultats de tests depuis tout analyseur TEG.
- Générez des rapports cliniques pour un ou plusieurs résultats de tests.
- Personnalisez les messages d'alerte clinique pour chaque paramètre ou une plage de paramètre en fonction des protocoles en vigueur dans l'établissement en utilisant le module de guide d'interprétation disponible.
- Observez le développement des paramètres au fur et à mesure de la progression du test.

## Optimisez le dispositif et la gestion des utilisateurs grâce à l'accès à distance aux analyseurs TEG®.

- Identifiez et résolvez rapidement les erreurs, affichez l'état de l'étalonnage et la version du logiciel sur tout analyseur TEG 6s connecté.
- Améliorez la sécurité grâce à l'administration des comptes d'utilisateur et des mots de passe sur les analyseurs TEG 6s.
- Optimisez l'utilisation de l'analyseur grâce aux rapports de fonctionnement.
- Gérez les mots de passe des utilisateurs de TEG Manager® grâce à l'intégration LDAP.

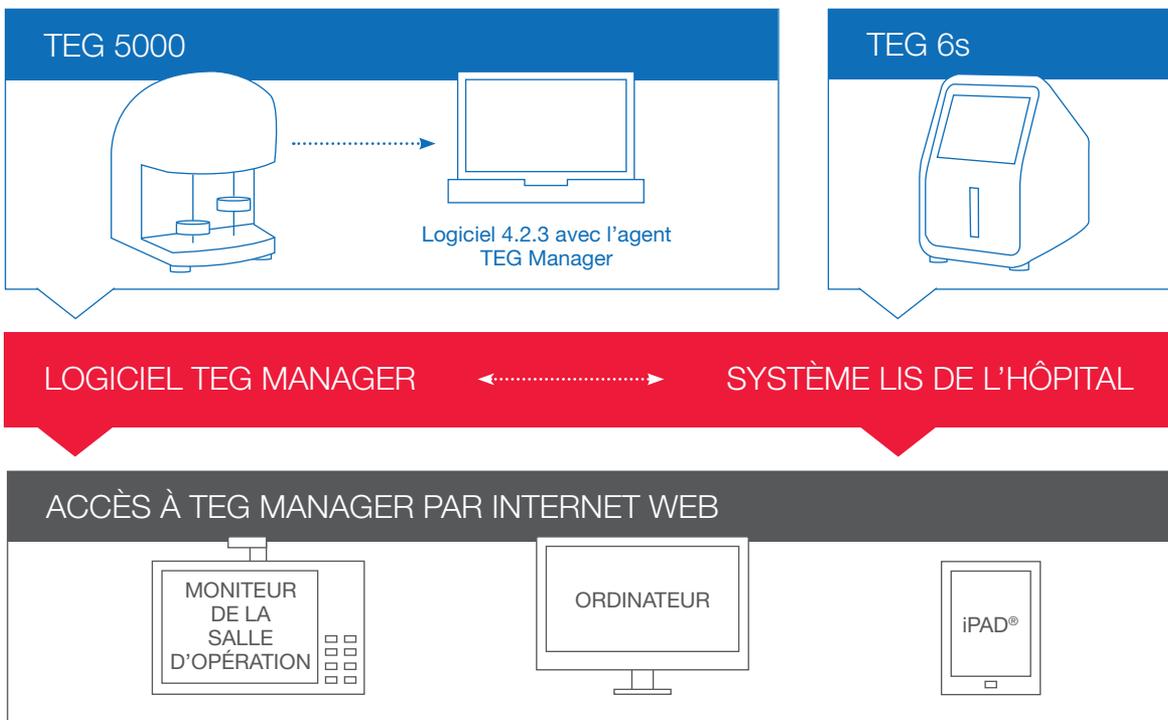

Remarque : Aucun client de bureau n'est nécessaire.

## Activez un flux d'information sûr et continu vers le système de votre hôpital grâce à une connectivité bi-directionnelle.

- Connectez le logiciel TEG Manager à des systèmes externes pour disposer des données en continu et pour intégrer les dispositifs.
- Les résultats de tests sont transmis de TEG Manager au système d'information du laboratoire (LIS) en utilisant le format HL7® standard.
- Utilisez les messages ADT (admission, sortie, transfert) pour générer des informations et des listes de patients dans TEG Manager.
- Il est possible de transmettre automatiquement les rapports cliniques au système de l'hôpital au format PDF.

# Exigences techniques

Un serveur (physique ou virtuel) ayant les caractéristiques minimales suivantes :


- Système d'exploitation/processeur de 64 bits à 2 GHz
- 4 Go de RAM
- 100 Go d'espace libre sur le disque dur
- Microsoft® .NET Framework 4.5
- Windows Server® 2012 R2 Standard avec TLS 1.2 activé pour la version 1.6 ou postérieure du firmware du dispositif
- SQL Server® 2012, 2014 ou 2016
- IIS 8.5

Lorsque votre objectif est d'offrir des soins efficaces et personnalisés à chaque patient, faites confiance à nos systèmes de gestion de l'hémostase TEG® pour obtenir une vue complète.



## EN SAVOIR PLUS

Consultez notre site Web [www.haemonetics.com](http://www.haemonetics.com) ou contactez votre chargé de clientèle Haemonetics.

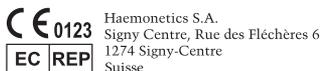

Pour obtenir la liste des bureaux dans le monde entier et leurs coordonnées, consultez [www.haemonetics.com/officelocations](http://www.haemonetics.com/officelocations).

© 2018 Haemonetics Corporation. Haemonetics, TEG et TEG Manager sont des marques commerciales ou des marques déposées qui appartiennent à Haemonetics Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. HL7 est une marque commerciale qui appartient à Health Level Seven International, Inc. Microsoft, Windows Server et SQL Server sont des marques commerciales qui appartiennent à Microsoft Corporation. iPad est une marque commerciale qui appartient à Apple, Inc. 07.2018 États-Unis. COL-COPY-001255-FR(AA)