



# TEG Manager<sup>®</sup>

Softwarelösung

Erhalten Sie Daten, wann  
und wo Sie diese benötigen.



**HAEMONETICS<sup>®</sup>**



## Leitfaden zur Interpretation

### Unkomplizierte Interpretation

Ein für die Verwendung mit der TEG Manager®-Software entwickelter Leitfaden zur Interpretation gibt Klinikern die Möglichkeit, klinische Warnmeldungen den Leitlinien ihrer Einrichtung entsprechend anzupassen.

Vereinfachte Anzeige und Interpretation von Testergebnissen mit der Möglichkeit, Warnmeldungen für Parameter nach Analysatorstandort – wie Labor oder Operationssaal – zu konfigurieren.

Außerdem trägt die Verwendung von vordefinierten, auf die Krankenhausrichtlinien zugeschnittenen Vorlagen zur Beseitigung von Fehlern bei, die bei der manuellen Eingabe der Testergebnisse auftreten können.

# TEG Manager®

## Softwarelösung

TEG Manager wurde zur Unterstützung von Klinikern beim Hämostasemanagement eines Patienten entwickelt, indem Testinformationen über eine vollständig integrierte Softwarelösung einfach verfügbar gemacht werden.

Die TEG Manager-Software dient der Fernbetrachtung von Diagnosedaten von TEG® 6s-Analysatoren und TEG 5000-Analysatoren innerhalb eines Krankenhauses.

Die als webbasierte Plattform entwickelte TEG Manager-Software fungiert als Zentralarchiv für Testdaten. Außerdem stellt die Software Konnektivität für das Management und die Kontrolle aller verbundenen TEG 6s-Analysatoren zur Verfügung, ganz gleich, wo sich diese befinden.






Bietet Klinikern  
Zugriff nach dem  
On-Demand-Prinzip  
zur einfacheren  
Anzeige der  
Testergebnisse.


- Verbessert die Patientensicherheit, da die demografischen Daten eines Patienten nach dem Scannen einer Probe bestätigt werden.
- Macht eine schnellere Versorgung möglich, da aktive TEG®-Tests von TEG-Analysatoren überall im Krankenhaus angezeigt werden können.
- Verbessert den Vergleich von aktiven und historischen Tests, indem sich Testergebnisse von jedem TEG-Analysator kombinieren und einblenden lassen.
- Erstellen Sie klinische Berichte für ein oder mehrere Testergebnisse.
- Passen Sie klinische Warnmeldungen für jeden Parameter oder Parameterbereich entsprechend den Richtlinien der Einrichtung mithilfe des Leitfadens zur Interpretation an.
- Beobachten Sie die Entwicklung von Parametern im Testverlauf.

## Optimieren Sie das Geräte- und Benutzermanagement über den Fernzugriff auf TEG®-Analysegeräten.

- Identifizieren und diagnostizieren Sie Fehler schnell, zeigen Sie den Kalibrierstatus und die Softwareversion auf jedem verbundenen TEG 6s-Analysator an.
- Optimieren Sie den Analyseteinsatz durch die Erstellung von Nutzungsberichten.
- Verbessern Sie die Sicherheit durch die Administration von Benutzerkonten und Passwörtern auf TEG 6s-Analysatoren.
- Managen Sie die Passwörter von TEG Manager®-Benutzern über die LDAP-Integration.

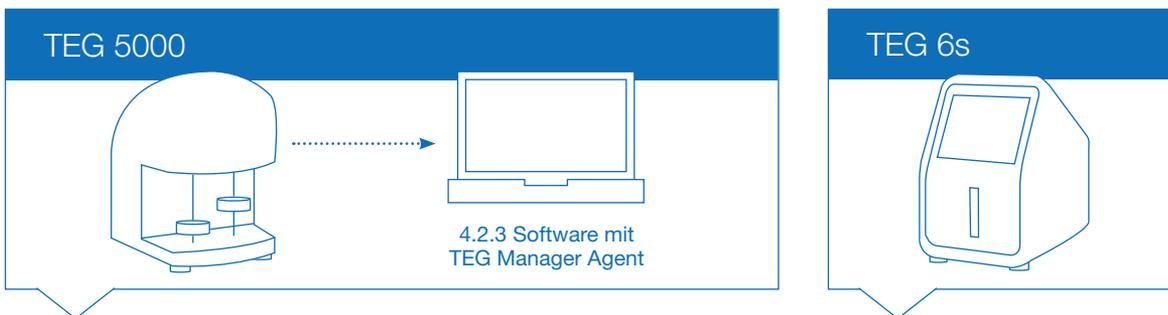

TEG MANAGER-SOFTWARE ↔ LIS-SYSTEM DES KRANKENHAUSES

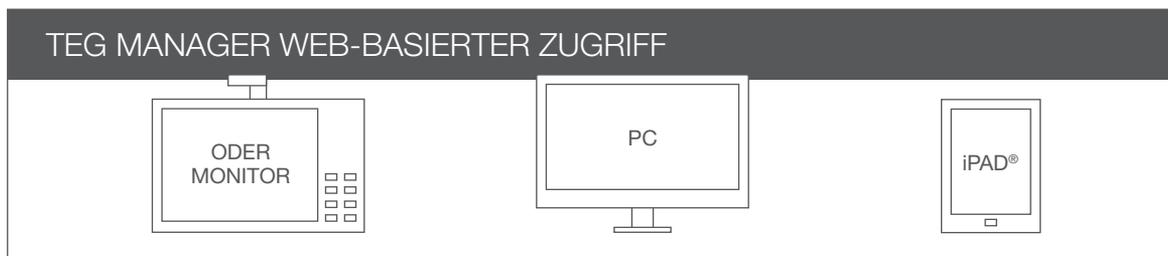

Hinweis: Desktop Client nicht erforderlich.

## Ermöglicht den sicheren und nahtlosen Informationsfluss zu Ihrem Krankenhaussystem mit bidirektionaler Konnektivität.

- Verbinden Sie die TEG Manager-Software mit externen Systemen für nahtlosen Datenaustausch und Geräteintegration.
- Nutzen Sie ADT-Meldungen zum Aufbau von Patientenlisten und Patientendaten im TEG Manager.
- Testergebnisse werden vom TEG Manager im HL7®-Standardformat an das Laborinformationssystem (LIS) des Krankenhauses gesendet.
- Klinische Berichte können im PDF-Format automatisch an das Krankenhaussystem gesendet werden.

# Technische Anforderungen

Server (virtuelle oder physische Maschine) mit mindestens:

- 64-Bit-Prozessor/OS mit 2 GHz
- 4 GB RAM
- 100 GB Festplattenspeicher
- Microsoft® .NET Framework 4.5
- Windows Server® 2012 R2 Standard mit TLS 1.2, der für Gerätefirmware Version 1.6 oder höher aktiviert ist
- SQL Server® 2012, 2014 oder 2016
- IIS 8.5

Wenn Sie jeden Patienten individuell und effektiv behandeln möchten, vertrauen Sie auf unsere TEG®-Hämostasemanagementsysteme für ein vollständiges klinisches Bild.



## WEITERE INFORMATIONEN

Besuchen Sie unsere Website [www.haemonetics.com](http://www.haemonetics.com) oder wenden Sie sich an Ihren Haemonetics-Kundenberater.

 Haemonetics S.A.  
Signy Centre, Rue des Fléchères 6  
1274 Signy-Centre  
Schweiz

Eine Liste unserer weltweiten Niederlassungen und Kontaktangaben finden Sie auf unserer Website: [www.haemonetics.com/officelocations](http://www.haemonetics.com/officelocations)

© 2018 Haemonetics Corporation. Haemonetics, TEG und TEG Manager sind Marken oder eingetragene Marken der Haemonetics Corporation in den USA und/oder in anderen Ländern. HL7 ist eine Marke von Health Level Seven International, Inc. Microsoft, Windows Server und SQL Server sind Marken der Microsoft Corporation. iPad ist eine Marke von Apple, Inc. 07.2018 USA. COL-COPY-001255-DE(AA)

Haemonetics S.A. ■ Signy Centre ■ Rue des Fléchères ■ P.O. Box 262 ■ 1274 Signy-Centre ■ Schweiz ■ [www.haemonetics.com](http://www.haemonetics.com)