



TEG Manager[®]

Soluzione software

Dati disponibili nel momento e nel punto in cui si rendono necessari.



HAEMONETICS[®]



Modulo della guida interpretativa

Interpretazione senza problemi.

È stato sviluppato un modulo della guida interpretativa per il funzionamento insieme al software TEG Manager®, per offrire ai medici l'opzione di personalizzare i messaggi di allarme clinico in conformità alle linee guida della propria struttura.

Semplifica la visualizzazione e l'interpretazione dei risultati del test, grazie alla capacità di configurare i messaggi di allarme per i parametri in base all'ubicazione dell'analizzatore (per esempio il laboratorio o la sala operatoria).

In aggiunta, l'uso di moduli preimpostati, disegnati in base alle linee guida ospedaliere, contribuisce a eliminare gli errori che possono verificarsi con l'immissione manuale dei risultati del test.

TEG Manager[®]

Soluzione software

TEG Manager è stato progettato come ausilio medico nella gestione dell'emostasi del paziente, garantendo un accesso semplificato alle informazioni relative al test per mezzo di una soluzione software completamente integrata.

Il software TEG Manager consente la visualizzazione remota di dati diagnostici dagli analizzatori TEG[®] 6s e TEG 5000 in tutto l'ospedale.

Disegnato come una piattaforma su base web, il software TEG Manager funge da archivio centrale per i dati dei test. Inoltre il software fornisce la connettività per la gestione e la supervisione di tutti gli analizzatori TEG 6s connessi, indipendentemente dalla loro ubicazione.






Accesso on-demand da parte del personale medico, per semplificare la visualizzazione dei risultati dei test.

- Migliora la sicurezza del paziente attraverso la conferma delle informazioni demografiche relative al paziente alla scansione di un campione.
- Aumenta la velocità della cura grazie alla visualizzazione dei test TEG® attivi dagli analizzatori TEG in un qualsiasi punto dell'ospedale.
- Migliora il confronto dei test attivi e completati, unendo e sovrapponendo i risultati dei test da qualsiasi analizzatore TEG.
- Genera report clinici per uno o più risultati di test.
- Consente di personalizzare i messaggi di allarme clinico per i singoli parametri o range di parametri in base alle linee guida dell'ente utilizzando il modulo della guida interpretativa disponibile.
- Permette di osservare lo sviluppo dei parametri durante il completamento del test.

Ottimizzazione della gestione dei dispositivi e degli utenti attraverso l'accesso remoto agli analizzatori TEG®.

- Identifica rapidamente e diagnostica gli errori, visualizza lo stato della calibrazione e la versione software su tutti gli analizzatori TEG 6s connessi.
- Ottimizza l'uso degli analizzatori attraverso i report di utilizzo in esecuzione.
- Migliora la sicurezza grazie all'amministrazione di account utente e password sugli analizzatori TEG 6s.
- Gestisce le password degli utenti di TEG Manager® tramite l'integrazione LDAP.

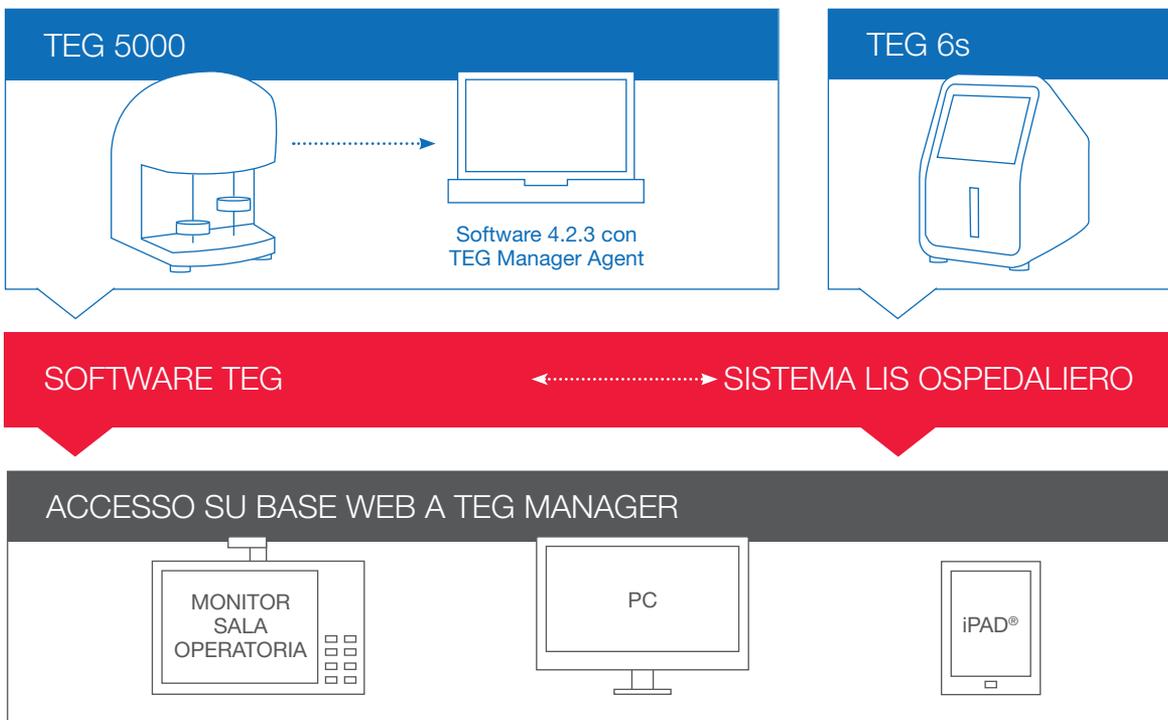

Nota: non è necessario un computer client.

Flusso ininterrotto e sicuro di informazioni al proprio sistema ospedaliero grazie alla connettività bidirezionale.

- Collega il software TEG Manager ai sistemi esterni per offrire l'utilizzo ininterrotto dei dati e l'integrazione dei dispositivi.
- Utilizza i messaggi ADT per la creazione di liste di pazienti e di informazioni in TEG Manager.
- I risultati dei test possono essere inviati da TEG Manager al LIS dell'ospedale in formato HL7® standard.
- I report clinici possono essere inviati automaticamente al sistema dell'ospedale in formato pdf.

Requisiti tecnici

Un server (virtuale o fisico) con i seguenti requisiti minimi:

- Processore a 64 bit / SO a 2 GHz
- 4 GB di RAM
- 100 GB di spazio disponibile su disco
- Microsoft® .NET Framework 4.5
- Windows Server® 2012 R2 Standard con TLS 1.2 abilitato per la versione firmware 1.6 o successiva
- SQL Server® 2012, 2014 o 2016
- IIS 8.5

Se il vostro obiettivo consiste nel fornire cure efficaci e personalizzate per i singoli pazienti, affidatevi ai sistemi di gestione dell'emostasi TEG® per ottenere il quadro completo.



PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Visitate il nostro sito Internet all'indirizzo www.haemonetics.com o contattate il responsabile della gestione clienti Haemonetics di zona.

 0123 Haemonetics S.A.
Signy Centre, Rue des Fléchères 6
1274 Signy-Centre
Svizzera


Per un elenco delle sedi nel mondo e per le informazioni di contatto, visitare il sito www.haemonetics.com/officelocations

© 2018 Haemonetics Corporation. Haemonetics, TEG e TEG Manager sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Haemonetics Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. HL7 è un marchio di fabbrica di Health Level Seven International, Inc. Microsoft, Windows Server e SQL Server sono marchi di fabbrica di Microsoft Corporation. iPad è un marchio di fabbrica di Apple, Inc. 07.2018 USA. COL-COPY-001255-IT(AA)

Haemonetics S.A. ■ Signy Centre ■ Rue des Fléchères ■ P.O. Box 262 ■ 1274 Signy-Centre ■ Svizzera ■ www.haemonetics.com